

Configurazione set circuito paziente neonato/pediatrico HAMILTON-HF90

Linee guida per la configurazione per il collegamento di un set circuito paziente neonato/pediatrico a HAMILTON-HF90

Prima di procedere

Esaminare le informazioni sulla sicurezza e verificare quanto segue:


- Avere a disposizione tutti i componenti necessari per erogare il trattamento. Assicurarsi di aver selezionato il tipo e la dimensione dell'interfaccia appropriati per il paziente.
- Prima dell'uso, controllare che il set circuito paziente non sia danneggiato. Eliminare il set circuito paziente se risulta danneggiato.

Collegamento del set circuito paziente a HAMILTON-HF90

1. Rimuovere il tappo dall'adattatore di uscita del gas.




2. Inserire la camera di umidificazione nel dispositivo.

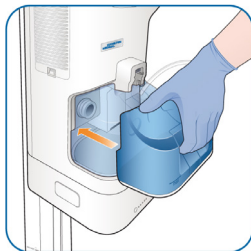

3. Collegare il circuito paziente.



4. Collegare l'alimentazione idrica.

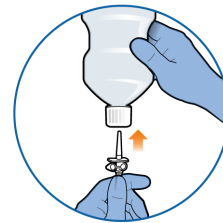

Posizionamento del set circuito paziente e del dispositivo

Dopo il montaggio, posizionare il circuito paziente e il dispositivo in modo che:

- Il dispositivo sia posizionato più in basso rispetto al livello del paziente.
- Le prese d'aria sui lati dell'apparecchio non siano bloccate né coperte. Queste aperture servono per l'aspirazione dell'aria respirabile e la ventola di raffreddamento.



- Collegare il circuito paziente all'uscita inspiratoria. Assicurarsi che scatti in posizione.
- Rimuovere il cappuccio posizionato sull'estremità paziente del circuito prima di collegare il circuito all'interfaccia o all'estensione dell'incubatrice.

- Utilizzare solo acqua sterile e demineralizzata per riempire la camera di umidificazione.
- Posizionare la fornitura d'acqua ad almeno $\geq 0,5$ m sopra il dispositivo.

Prima di iniziare il trattamento del paziente

Collegare i pazienti solo alle interfacce nasali o per tracheostomia appositamente progettate per la terapia con ossigeno ad alto flusso; questi tipi di interfacce consentono al paziente di espirare.

Set circuito paziente, branca singola, neonato/pediatrico

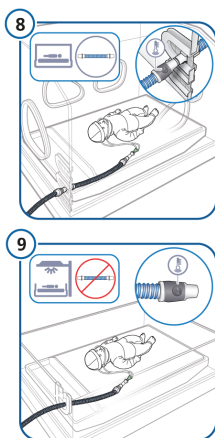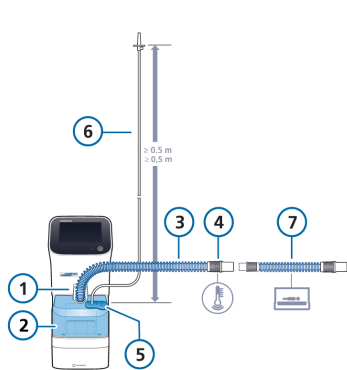

1 Connessione del circuito paziente (uscita inspiratoria verso il paziente)

2 Camera di umidificazione

3 Circuito paziente riscaldato

4 Collegamento all'interfaccia paziente o all'estensione dell'incubatrice, sensore di temperatura

5 Porta del nebulizzatore

6 Linea di alimentazione dell'acqua con perforatore

7 *Solo per pazienti neonatali.* Estensione incubatrice, da utilizzare nell'incubatrice con set di circuito paziente neonato/pediatrico PN 10103261 e 10119946

8 *Solo per pazienti neonatali.* Configurazione per incubatrice

9 *Solo per pazienti neonatali.* Configurazione per letto riscaldante

Posizionamento del set circuito paziente e del dispositivo

Dopo il montaggio, posizionare il circuito paziente e il dispositivo in modo che:

- Il dispositivo e il circuito non entrino in contatto con il flusso d'aria diretto dell'aria condizionata o l'irraggiamento solare diretto.
- Il circuito riscaldato non sia posizionato direttamente sulla pelle del paziente.
- Il circuito sia privo di tensione e che non venga spinto, tirato o attorcigliato a seguito del movimento, del trasporto o di altre attività del paziente.
- L'eventuale condensa ritorni nella camera di umidificazione e non verso il paziente.
- Il circuito e i tubi vengano lasciati scoperti e si trovino sopra eventuali lenzuola o coperte.
- *Solo per pazienti neonatali.* L'estensione dell'incubatrice è collegata al circuito paziente e può essere utilizzata solo all'interno dell'incubatrice.
- *Solo per pazienti neonatali.* Posizionare sempre la branca riscaldata con la sonda termica all'esterno dell'incubatrice.