

NOUVEAU



HAMILTON-EM7

Ventilation fiable en soins d'urgence

Le HAMILTON-EM7 est conçu pour permettre une ventilation fiable, au moment et à l'endroit où elle est nécessaire. Conçu pour être utilisé dans des environnements complexes, pour un large éventail d'affections respiratoires, il offre des performances constantes pour aider les professionnels de santé à prodiguer des soins efficaces aux patients.

HAMILTON
MEDICAL

Pour une manipulation et une installation faciles

La polyvalence sans compromis

Le HAMILTON-EM7 offre des modes de ventilation non invasive et invasive (incluant l'oxygénothérapie) pour les patients adultes et enfants.

Résistant, compact, durable

Boîtier en aluminium solide et étanche pour faire face à des conditions difficiles.

Les performances grâce à la turbine

La turbine et le mélangeur de gaz intégrés permettent de régler directement sur le dispositif la concentration en oxygène et le débit.


Conçu pour une clarté totale

L'écran tactile couleur, le bouton appuyer-tourner et les touches permettent une utilisation intuitive, renforcée par une interface épurée et conviviale.



-  H 13,3 x l 28 x P 12,6 cm
-  < 4,5 kg
-  Jusqu'à 8,5 heures
-  Patients adultes et enfants
-  Débit > 215 l/min
-  Interface Bluetooth

Processus simplifiés pour une sécurité accrue des patients

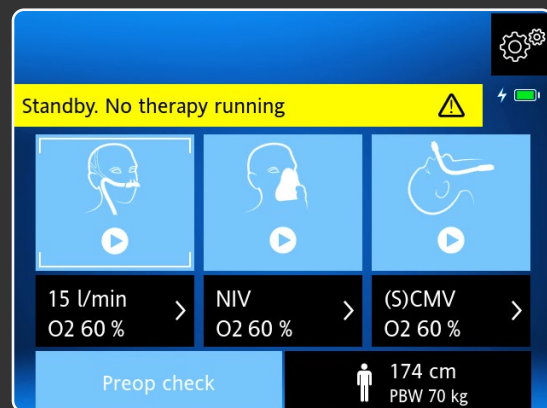


Paramètres personnalisables

- ✓ Paramètres de démarrage rapide pour une ventilation invasive et non invasive conformément à vos protocoles.
- ✓ Personnalisation des modes affichés pour votre équipe



Ventilation à aide adaptative

- ✓ L'ASV adapte en continu la fréquence respiratoire, le volume courant et le temps inspiratoire en fonction de la mécanique et de l'activité respiratoires du patient.

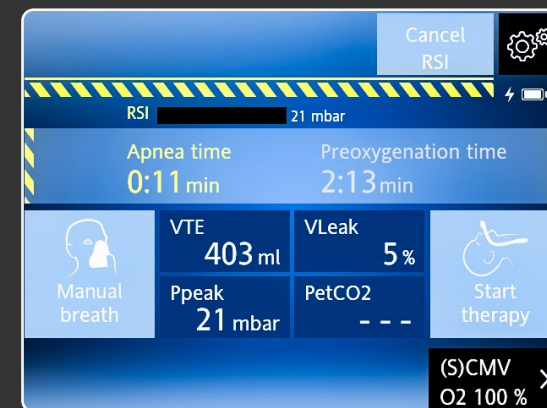

Intubation en séquence rapide

- ✓ Instructions claires et détaillées pour une intubation rapide
- ✓ Transition fluide garantie entre la VNI et la ventilation invasive



Ventilation RCP


- ✓ Réglage des alarmes et du déclenchement
- ✓ Affichage d'un chronomètre RCP sur l'écran
- ✓ Formes d'ondes pertinentes et principaux paramètres de monitoring

Ventilation Plug and Play



Options de poignée

Choisissez parmi différentes options astucieuses de montage et de poignées pour une utilisation flexible sur le terrain comme à bord des véhicules. Lorsque le dispositif est monté sur un mur ou sur une étagère, le chargeur intégré commence automatiquement à recharger la batterie.

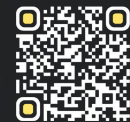

Solution tout-en-un


Kit de circuit respiratoire monobloc avec lignes de pression, valve expiratoire et capteur de débit intégrés pour un raccordement fiable et simple.



Devenir un Vent Whisperer

Centre d'apprentissage

Le centre d'apprentissage HAMILTON-EM7 propose des parcours d'apprentissage pas à pas pour vous aider à vous familiariser rapidement avec votre ventilateur et ses fonctionnalités.

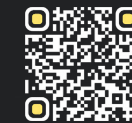

Application VenTrainer

Testez les connaissances que vous venez d'acquérir sur notre application interactive VenTrainer et utilisez votre ventilateur et ses fonctionnalités en toute sécurité dans des simulations de scénarios de patients.





Informations complémentaires :
www.hamilton-em7.com



HAMILTON
MEDICAL

Fabricant :

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Suisse

+41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

ELO20260613N.00

Les produits présentés ici ne sont pas commercialisés auprès du grand public. Les informations fournies ici sont destinées aux professionnels de santé uniquement. Veuillez toujours lire les étiquettes et respecter les instructions d'utilisation du produit. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certaines fonctions sont fournies en option. Notez que toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans tous les pays. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement le produit ou son utilisation. Pour toutes les marques propriétaires (®), ainsi que les marques d'autres fabricants utilisées par Hamilton Medical AG, consultez le site www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2026 Hamilton Medical AG. Tous droits réservés.

HAMILTON-EM7