



Le nouveau HAMILTON-C6

Pour accompagner tout votre processus de ventilation

HAMILTON
MEDICAL



Notre passion. Solutions de ventilation intelligente

Depuis la création de notre société en 1983, notre objectif a été de soutenir les héros des soins critiques qui travaillent en première ligne, avec des technologies de ventilation sûres, efficaces et protectrices. Nous voulons aussi alléger la charge de travail des personnes qui déploient chaque jour des efforts extraordinaires pour aider des patients en état critique à recouvrer la santé.

C'est pourquoi nous nous sommes engagés à aider le personnel médical à fournir les meilleurs soins respiratoires, à quiconque, où que ce soit. Cet engagement est présent dans toutes nos actions.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Hamilton'.

Bob Hamilton
PDG

Découvrez le nouvel HAMILTON-C6

Le nouvel HAMILTON-C6 offre bien plus que de simples fonctions, c'est la solution complète pour tout votre processus. Il vous assiste à chaque étape du parcours du patient, pour vous permettre de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important : votre patient.

- ✓ Modes de ventilation à la pointe de la technologie pour adultes, enfants et nouveau-nés
- ✓ Modes de ventilation protectrice pulmonaire et à aide adaptative ASV® et INTELLiVENT®-ASV
- ✓ Synchronisation du patient en temps réel IntelliSync+®
- ✓ Ventilation non invasive haute performance
- ✓ Thérapie d'oxygène à haut débit
- ✓ Fonction P/V Tool® pour l'évaluation et le recrutement pulmonaires
- ✓ Mesure de la pression transpulmonaire
- ✓ O2 assist
- ✓ Contrôleur de pression IntelliCuff® intégré
- ✓ Accès à distance aux réglages et au statut de l'humidificateur



Profilé, flexible, pratique

Configuration flexible de l'appareil

Le HAMILTON-C6 s'adapte à votre propre environnement utilisateur. Installez-le sur un chariot, avec le panneau d'interaction placé au sommet ou en façade ou utilisez la version sur bras support, avec le panneau d'interaction placé sur le côté ou sur le système de potence.

Mobilité au sein de l'hôpital

Grâce à son châssis profilé, au porte-bouteille d'oxygène intégré et à la turbine haute performance, le HAMILTON-C6 peut rester au chevet de votre patient lors des déplacements au sein de l'hôpital.

Manœuvrabilité ergonomique

Grâce à son faible encombrement et aux roulettes de chariot de grande qualité, le HAMILTON-C6 est conçu pour une manipulation et une manœuvrabilité simples.






Présentation du nouveau processus

Le nouvel HAMILTON-C6 vous aide tout au long du parcours du patient, de l'admission au sevrage, grâce à des outils et fonctionnalités avancés afin de faciliter tout votre processus. De plus, nous avons développé de nouvelles solutions ciblées conçues pour vous aider à chaque étape de ce parcours.

Plutôt que de nous concentrer sur des fonctions isolées, nous avons choisi une approche globale qui réunit les tâches individuelles afin de former un processus rationalisé et intuitif. Il en résulte une solution complète pour le processus, conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle, même dans les environnements de soins les plus exigeants.

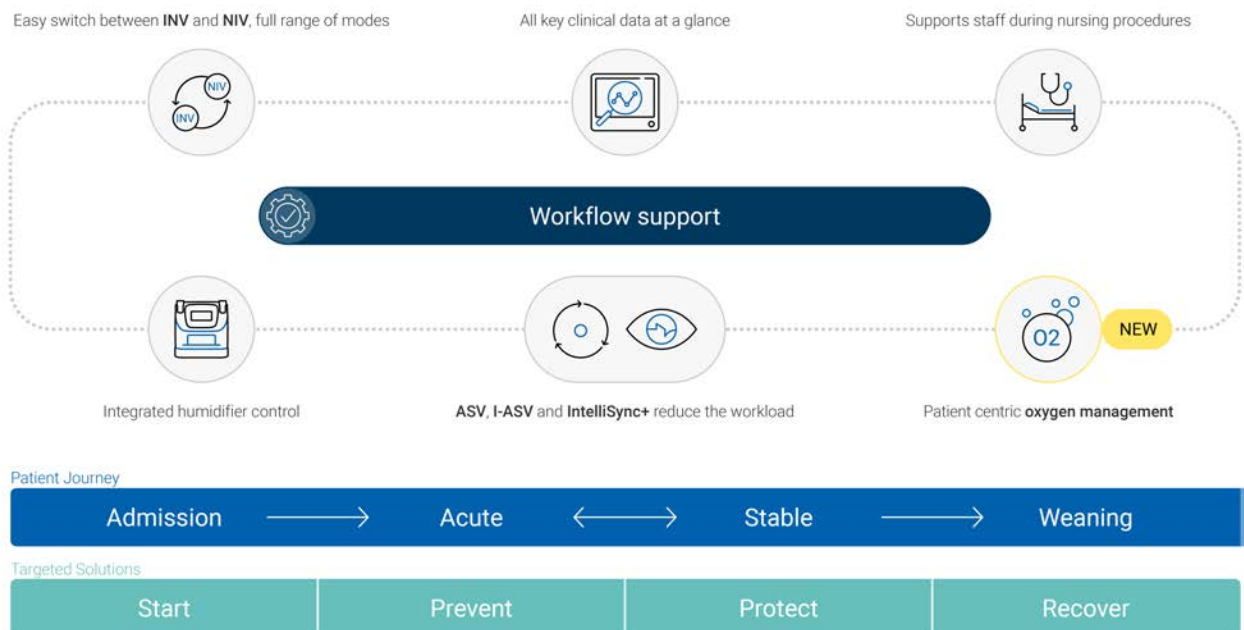

Le Ventilation Cockpit

1 Principaux paramètres de monitoring

Les principaux paramètres de monitoring sont tous visibles en un coup d'œil. La grande police de caractères vous permet de les voir même de loin.

2 Panneau DynPulm

Vous pouvez visualiser rapidement le volume courant, la compliance pulmonaire, le déclenchement par le patient, la résistance en temps réel, la pression du ballonnet et le pouls. Les poumons se distendent et se rétractent en synchronisation avec les cycles réels.

3 Panneau Impact poumons

Le panneau Impact poumons représente visuellement les quatre paramètres clés de la ventilation de protection pulmonaire. Il vous permet de monitorer ces valeurs critiques en un coup d'œil et de prendre des décisions éclairées en temps réel.

4 Application App World

L'application App World offre un accès rapide en deux étapes aux principales fonctions du ventilateur dans une seule fenêtre d'aperçu. Grâce aux icônes intuitives et à la personnalisation des favoris, l'application App World simplifie votre processus de ventilation lorsque chaque seconde compte.



Ventilation protectrice pulmonaire personnalisée

Ventilation protectrice pulmonaire et à aide adaptative avec l'ASV

- ✓ Favorise une prompte respiration spontanée du patient.^{1, 2}
- ✓ Diminue la durée de ventilation chez plusieurs groupes de patients.^{1, 2}

Votre assistant au chevet du patient INTELLiVENT-ASV

- ✓ Nécessite moins de réglages manuels que dans la ventilation classique, ce qui réduit la charge de travail du personnel soignant.³
- ✓ Respecte les dernières recommandations en matière de ventilation protectrice pour les volumes courants, la pression motrice et la puissance mécanique.^{4, 5, 6}

Évaluation et recrutement pulmonaires avec la fonction P/V Tool

- ✓ L'hystérésis de la courbe pression/volume peut être utilisée pour évaluer la capacité de recrutement du poumon au chevet du patient.⁷
- ✓ Peut réduire le besoin d'évaluer la capacité de recrutement par tomodensitométrie, dans le cadre d'une utilisation de la boucle P/V lors de la survenue précoce d'un SDRA.⁸

Synchronisation basée sur l'analyse des formes d'ondes avec l'IntelliSync+

- ✓ L'analyse des formes d'ondes est une méthode fiable, précise et reproductible permettant d'évaluer l'interaction entre le patient et le ventilateur.⁹
- ✓ En termes de cyclage, l'IntelliSync+ est au moins aussi performant que lorsque l'option Cyclage est optimisée par le médecin.¹⁰

O2 assist, votre assistant dans les soins de précisions

- ✓ L'option O2 assist permet de maintenir les niveaux de SpO2 de votre patient dans les plages cibles définies individuellement en réglant en continu l'administration d'oxygène^{11, 12}
- ✓ Compatible avec tous les modes de ventilation invasifs et non-invasifs, ainsi qu'avec la thérapie d'oxygène à haut débit¹³

Contrôle automatique de pression du ballonnet avec l'IntelliCuff

- ✓ Le contrôle continu de pression du ballonnet peut diminuer la micro-aspiration et la BPAVM.^{14, 15}

¹ Kirakli C. Eur Respir J. 2011 Oct;38(4):774-80

² Chen CW. Respir Care. 2011 Jul;56(7):976-83

³ Bialais, E., et al., Minerva Anesthesiol, 2016. 82(6): p. 657-68

⁴ Arnal JM. Intensive Care Med Exp 2016, 4(Suppl 1):A602

⁵ Arnal, J.-M., M. Saoli, and A. Garnero, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care. 2019 Nov

⁶ Buiterman-Kruizinga LA. Crit Care Explor. 2021 Feb 15;3(2):e0335

⁷ Demory D. Intensive Care Med. 2008 Nov;34(11):2019-25

⁸ Chiumello D. Crit Care Med. 2020 Oct;48(10):1494-1502

⁹ Mojoli F. Intensive Care Med Exp 2016, 4(Suppl 1):A1168

¹⁰ Mojoli F. Intensive Care Med Exp 2016, 4(Suppl 1):A1164


¹¹ Roca O. Crit Care. 2022 Apr 14;26(1):108

¹² Atakul G. Front Med (Lausanne) 2024 Sep;10:11:1426969

¹³ Sauf RCP et INTELLiVENT-ASV

¹⁴ Lorente L. Critical Care. 2014;18(2):R77

¹⁵ Nseir S. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2011;184(9):1041-1047

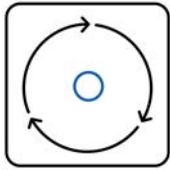

La ventilation à aide adaptative (ASV)

ajuste en continu la fréquence respiratoire, le volume courant et la pression inspiratoire en fonction de la mécanique et de l'activité respiratoires du patient. L'ASV adapte la ventilation à chaque cycle, 24h/24 et de l'intubation à l'extubation.



L'INTELLiVENT-ASV, votre assistant au chevet du patient

est un mode de ventilation avancé basé sur l'ASV. Le médecin définit les objectifs cliniques concernant la $P_{et}CO_2$ et la SpO_2 . L'INTELLiVENT-ASV ajuste ensuite les réglages d'élimination du CO_2 et d'oxygénation et maintient le patient dans les plages prédéfinies. La fonction Sevrage rapide assiste le médecin lors du sevrage des patients sous ventilation mécanique.



La fonction P/V Tool pour l'évaluation et le recrutement pulmonaires

permet d'évaluer la capacité de recrutement et de régler la PEP en fonction de la mécanique respiratoire. Elle fournit également une méthode reproductible pour procéder rapidement aux manœuvres de recrutement.




L'IntelliSync+ garde un œil sur la synchronie patient-ventilateur

en analysant en continu des formes d'ondes plusieurs centaines de fois par seconde. L'IntelliSync+ peut alors détecter immédiatement les efforts du patient et le cyclage et initier l'inspiration et l'expiration en temps réel. L'IntelliSync+ s'applique à la ventilation invasive et non invasive, quel que soit le mode de ventilation.



O2 assist

est disponible sur simple pression d'un bouton. Prenez le contrôle de la gestion de l'oxygène en réglant des cibles de SpO_2 personnalisées pour vos patients. Le système règle en continu l'alimentation en oxygène pour répondre aux besoins de votre patient en temps réel et le protéger potentiellement contre l'hyperoxémie et l'hypoxémie. Cela vous permet de consacrer plus de temps à d'autres tâches importantes au chevet du patient.

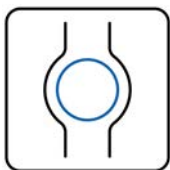


Le contrôleur de pression IntelliCuff

mesure en permanence et maintient automatiquement, en temps réel, la pression du ballonnet définie par l'utilisateur pour une sonde d'intubation ou de trachéotomie.

Fonctions et options



Modes de ventilation à la pointe de la technologie

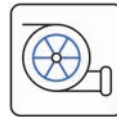

Turbine haute performance bénéficiant d'une garantie pour toute la durée de vie prévue du ventilateur



Thérapie d'oxygène à haut débit intégrée



Accès à distance aux réglages et au statut du HAMILTON-H900



Nébuliseur Aerogen pneumatique intégré et en option



Interface série pour la connexion à des PDMS ou à des moniteurs patient



Oxymétrie de pouls (mesure de la SpO2 et du pouls)



Aide en ligne pour la résolution des alarmes




Capnographie « mainstream » (volumétrique) et « sidestream »



Ventilation RCP



Monitoring continu de la pression motrice

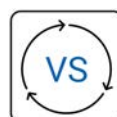

Assistance en volume (VS) pour un sevrage personnalisé



Ventilation pour adultes, enfants et nouveau-nés



Manœuvre de pause pour la mesure de la force inspiratoire négative (FIN)

Message du spécialiste de la ventilation

Academy

Notre Academy propose des contenus de formation gratuits et libres d'accès sur la ventilation mécanique et les ventilateurs.

Rejoignez-nous sur :

www.hamilton-medical.com/Academy.

Consommables de ventilateurs universels

Nos accessoires et consommables ont été spécialement conçus pour optimiser la simplicité d'utilisation et la sécurité du patient. Vous avez le choix entre des pièces réutilisables ou à usage unique, en fonction des règles en vigueur dans votre établissement.

Dispositifs périphériques

Notre gamme dédiée à la ventilation comprend un humidificateur actif, le HAMILTON-H900, ainsi que le contrôleur automatique de pression du ballonnet, IntelliCuff. Ces deux dispositifs peuvent être utilisés avec tout type de ventilateur mécanique.





Plus d'informations et simulation logicielle gratuite :
www.hamilton-C6.com



Fabricant :

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland



+41 58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

ELO20250314S.01

Les produits présentés ici ne sont pas commercialisés auprès du grand public. Les informations fournies ici sont destinées aux professionnels de santé uniquement. Veuillez toujours lire les étiquettes et respecter les instructions d'utilisation du produit. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certaines fonctions sont fournies en option. Notez que toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans tous les pays. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement le produit ou son utilisation. Pour toutes les marques propriétaires (®), ainsi que les marques d'autres fabricants utilisées par Hamilton Medical AG, consultez le site www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2026 Hamilton Medical AG. Tous droits réservés.

Le nouveau HAMILTON-C6