

NOVITÀ



HAMILTON-EM7

Ventilazione affidabile per l'emergenza-urgenza

L'HAMILTON-EM7 è progettato per offrire un supporto ventilatorio affidabile in qualsiasi momento e ovunque ne sia la necessità. È costruito per essere utilizzato in ambienti difficili e per trattare un'ampia serie di condizioni respiratorie, garantendo prestazioni sempre affidabili per aiutare il personale sanitario ad assistere i pazienti in modo efficace.

HAMILTON
MEDICAL

Semplice da gestire e da configurare

Versatilità senza compromessi

L'HAMILTON-EM7 prevede modalità di ventilazione non invasive e invasive, compresa la terapia con ossigeno, per pazienti adulti e pediatrici.

Robusto, compatto, durevole

Involucro in alluminio solido e resistente all'acqua, progettato per tollerare condizioni difficili.

La turbina è il cuore delle prestazioni

La turbina e il miscelatore di gas integrati consentono di regolare la concentrazione di ossigeno e il flusso direttamente sul dispositivo.


Progettato per essere chiaro

Il touchscreen a colori, la manopola a pressione-rotazione e i tasti fisici consentono un utilizzo intuitivo, reso ancora più efficiente dall'interfaccia pulita e user-friendly.



-  A 13,3 × L 28 × P 12,6 cm
-  < 4,5 kg
-  Fino a 8,5 ore
-  Pazienti adulti e pediatrici
-  Flusso > 215 l/min
-  Interfaccia Bluetooth

Flussi di lavoro più semplici e maggiore sicurezza per il paziente

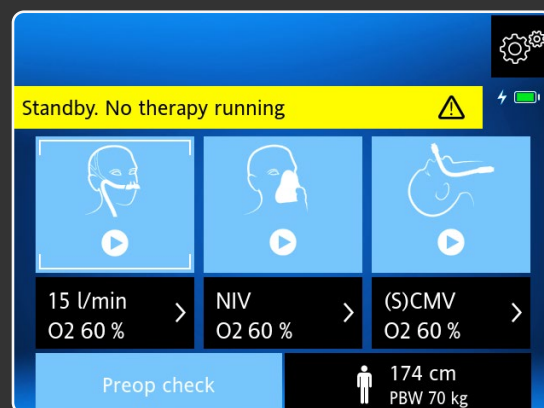


Impostazioni personalizzabili

- ✓ Impostazioni di avvio rapido per la ventilazione invasiva e non invasiva in conformità ai propri protocolli
- ✓ Personalizzazione delle modalità visibili per ciascuna squadra



Adaptive Support Ventilation

- ✓ Questa modalità di ventilazione adatta costantemente frequenza respiratoria, volume corrente e tempo inspiratorio in base a meccanica polmonare e sforzo del paziente

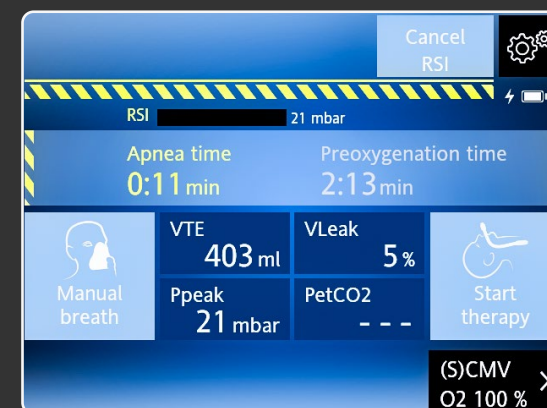

Sequenza rapida di intubazione


- ✓ Guida chiara per l'intubazione rapida passo-passo
- ✓ Per garantire un passaggio fluido dalla NIV alla ventilazione invasiva



Ventilazione per CPR


- ✓ Regolazione di trigger e allarmi
- ✓ Timer per CPR visibile su schermo
- ✓ Parametri di monitoraggio principali e curve rilevanti

Ventilazione immediata

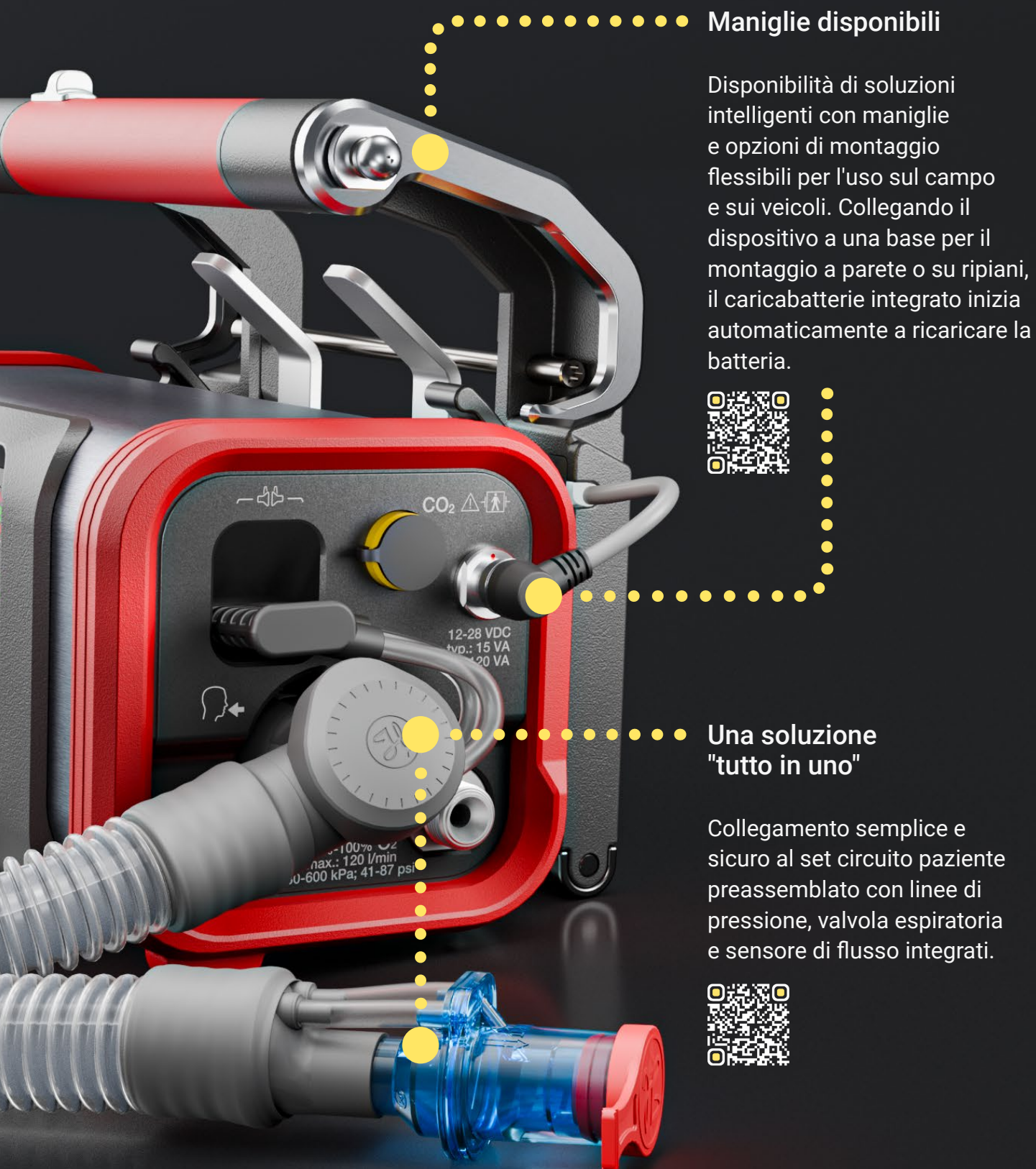

Maniglie disponibili

Disponibilità di soluzioni intelligenti con maniglie e opzioni di montaggio flessibili per l'uso sul campo e sui veicoli. Collegando il dispositivo a una base per il montaggio a parete o su ripiani, il caricabatterie integrato inizia automaticamente a ricaricare la batteria.

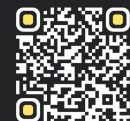

Una soluzione "tutto in uno"


Collegamento semplice e sicuro al set circuito paziente preassemblato con linee di pressione, valvola espiratoria e sensore di flusso integrati.



Diventate Vent Whisperer


Hub per la formazione

L'hub per la formazione sull'HAMILTON-EM7 propone percorsi di apprendimento passo-passo per imparare a conoscere rapidamente il ventilatore e le sue funzioni.

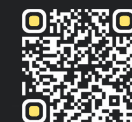

App VenTrainer

Per mettere alla prova le competenze appena acquisite c'è l'app interattiva VenTrainer, che consente di usare il ventilatore e le sue funzioni in sicurezza in scenari con pazienti simulati.

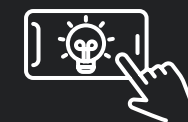



Per ulteriori informazioni:
www.hamilton-em7.com



HAMILTON
MEDICAL

Produttore:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Svizzera

+41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

ELO20260610N.00

I prodotti mostrati non sono acquistabili dal grande pubblico. Le informazioni qui fornite sono destinate unicamente agli operatori sanitari professionisti. Leggere sempre le etichette e seguire le istruzioni per l'uso dei prodotti. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Alcune funzionalità sono opzionali. Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i mercati. Tutte le immagini sono esclusivamente a scopo illustrativo ed è possibile che non rappresentino fedelmente il prodotto o il suo utilizzo. Per tutti i marchi registrati (®) e i marchi registrati di terze parti utilizzati da Hamilton Medical AG, vedere la pagina web www.hamilton-medical.com/trademarks. ©2026 Hamilton Medical AG. Tutti i diritti riservati.

HAMILTON-EM7